

Fergus



QuickFit PK

RAPIDEZ Y SEGURIDAD
EN LA REPARACIÓN SIN NUDOS

QuickFit PK

El ancla impactada **QuickFit PK** de **2,9 mm** está diseñada para lograr una rápida fijación del tejido en reparaciones sin nudos.

FIJACIONES SEGURAS, MÁXIMA ESTABILIDAD

DIMENSIONES

2,9 mm de diámetro
por 15,5 mm de longitud

IMPLANTACIÓN PRECISA


Sus marcas láser permiten
identificar la profundidad de
implantación adecuada

DESARROLLADA EN PEEK

Su módulo de elasticidad similar al tejido óseo
posibilita un mejor desempeño biomecánico

ESPIGAS PRONUNCIADAS

Garantizan un bloqueo seguro del implante
en el tejido óseo

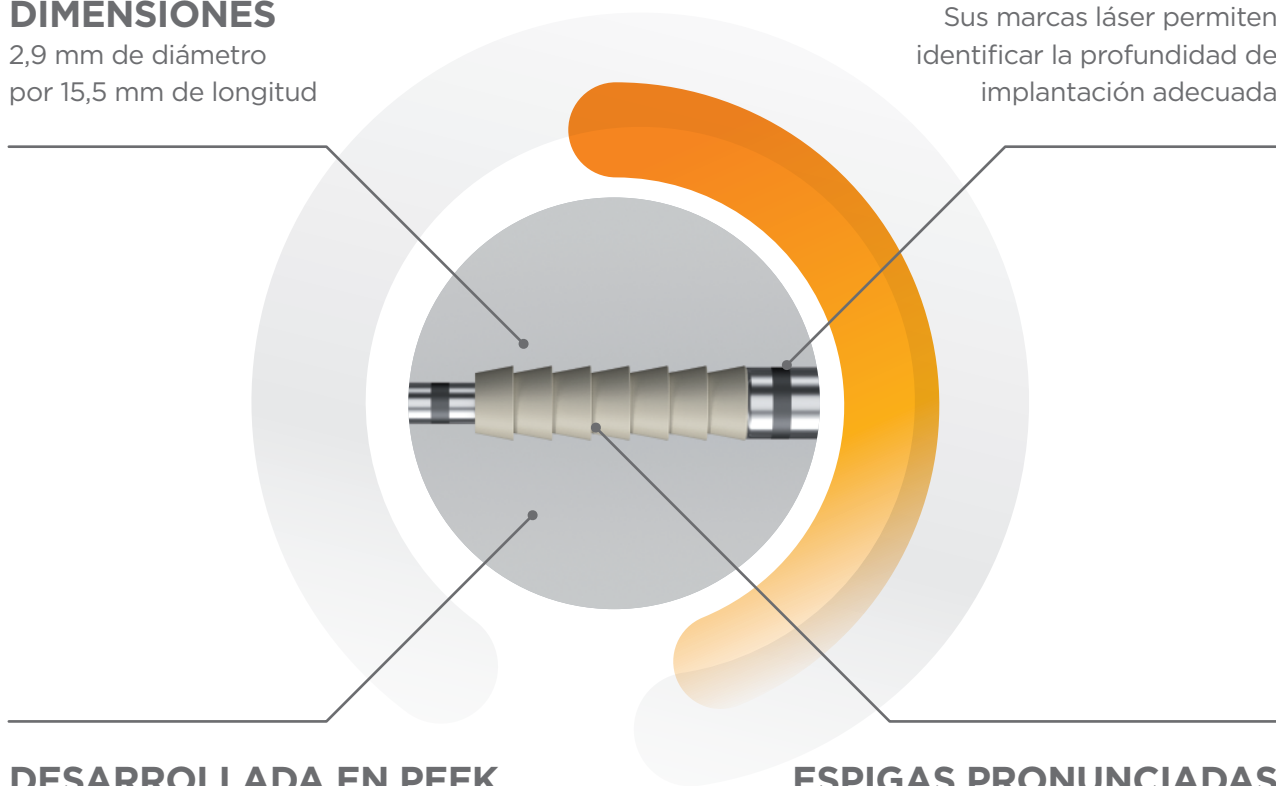

DISEÑO INNOVADOR PARA UNA PERFORMANCE EFICIENTE




Zona de impacto de alta resistencia
con clip de seguridad de desacople rápido

Zona de sujeción amplia
para mayor precisión y control durante la implantación

Zona de retención de suturas
para bloquear la tensión de la sutura en la etapa de preimplantación

Compatible con sutura tipo cinta de 1,5 mm para aumentar la superficie de contacto con el labrum en la reparación

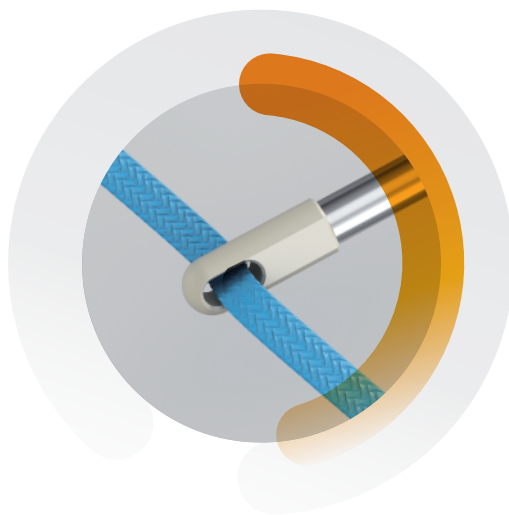

Ojal distal
para un correcto aseguramiento de sutura

ANCLAJE OPTIMIZADO

- Fijación segura
- Fácil y rápida inserción
- Diseño ergonómico
- Mejora la interacción con el tejido blando gracias a su compatibilidad con sutura tipo cinta de 1,5 mm



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Implantes

Código	Descripción
FG-AN022029	Ancla QuickFit PK de 2,9 mm x 15,5 mm

Productos asociados

Código	Descripción
FG-SU711115	Sutura TapeFit, tipo cinta, de 1,5 mm de UHMWPE, azul, de 38" (96 cm) de longitud
FG-CN910670	Cánula rígida roscada de 6 mm x 70 mm con obturador descartable
FG-CN910690	Cánula rígida roscada de 6 mm x 90 mm con obturador descartable
FG-CN910870	Cánula rígida roscada de 8 mm x 70 mm con obturador descartable
FG-CN910890	Cánula rígida roscada de 8 mm x 90 mm con obturador descartable

Instrumentales asociados

Código	Descripción
FG-IN082029	Broca para QuickFit de 2,9 mm
FG-IN013000	Guía de implantación de 3,2 mm