

Fergus



## SpinFit PK

PRECISIÓN Y CONFIABILIDAD  
EN LA REPARACIÓN SIN NUDOS

# SpinFit PK

El ancla roscada **SpinFit PK** de **4,7 mm** está diseñada para optimizar la fijación sin nudos de tejidos blandos sobre la superficie ósea.

## FIJACIÓN OPTIMIZADA Y DESEMPEÑO SUPERIOR

### DIMENSIONES

4,7 mm de diámetro  
por 19,1 mm de longitud

### MICROPERFORACIONES


Facilitan el proceso  
de osteointegración

### DESARROLLADA EN PEEK


Su módulo de elasticidad similar al tejido óseo  
posibilita un mejor desempeño biomecánico

### ESPIRA HELICOIDAL COMPLETA

Brinda una mayor superficie  
de fijación con el tejido óseo

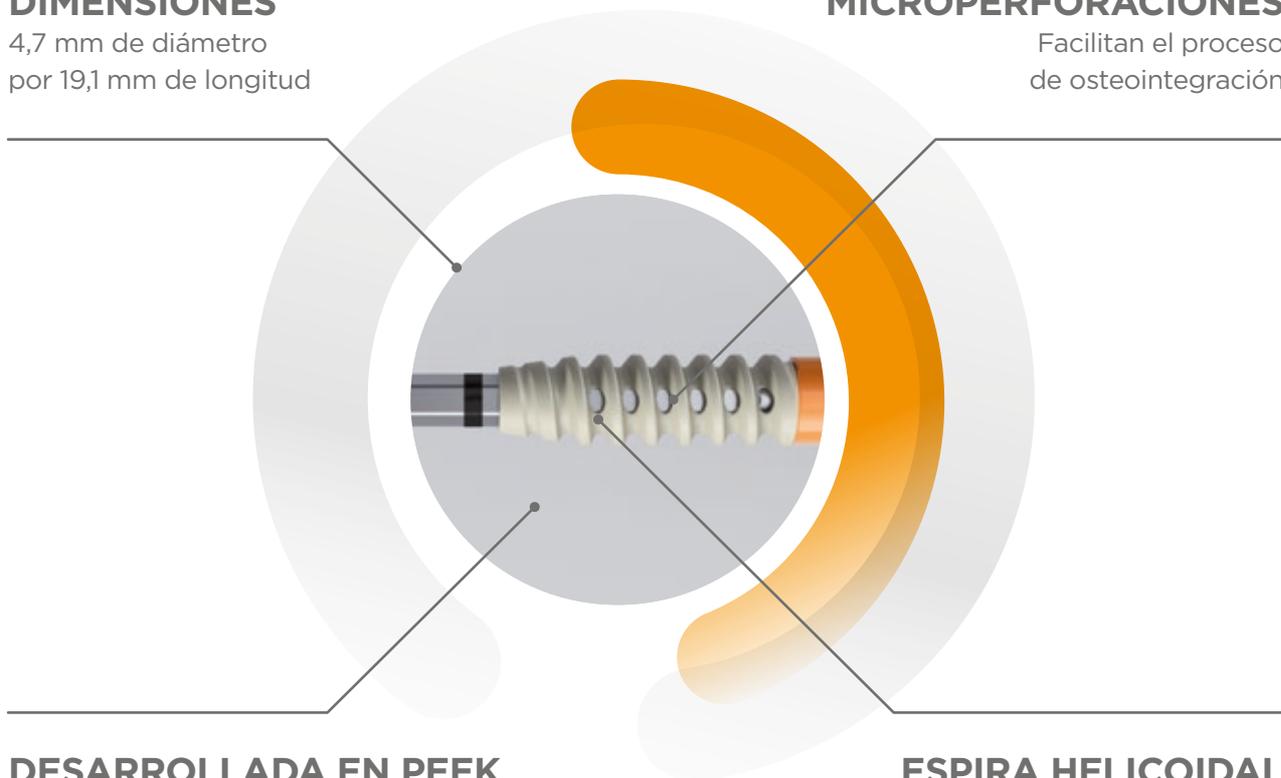

# MÁXIMA PRECISIÓN EN EL ABORDAJE Y COLOCACIÓN

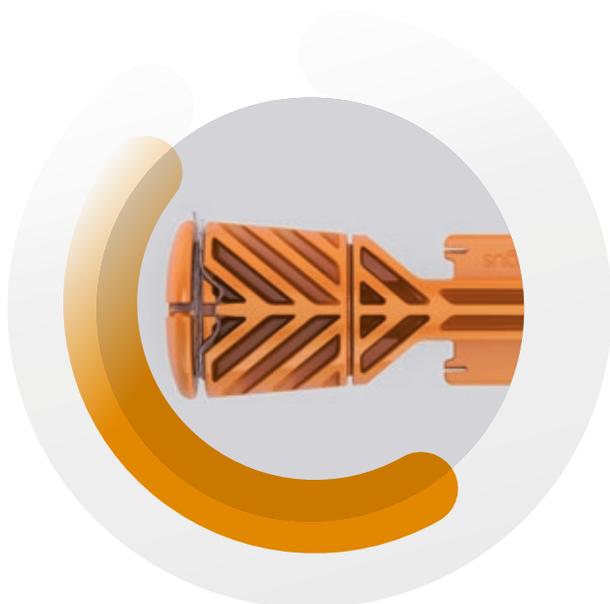

**Extensa zona de sujeción** a lo largo del mango que brinda mayor precisión durante la implantación

**Fijación segura** de la sutura gracias al ojal ubicado en el extremo distal



**Mecanismo de accionamiento** en el mango que proporciona un avance preciso y uniforme del ancla



**Amplia superficie de contacto** con el tejido por la sutura TapeFit Max de 2 mm, que evita el daño del tejido por cizallamiento



# REPARACIONES SIMPLES Y SEGURAS, EN MENOS PASOS

- Diseño ergonómico
- Calidad de fijación superior
- Fácil y rápida inserción
- Disponible en versión con sutura precargada TapeFit Max y versión sin sutura



## INFORMACIÓN DE PRODUCTO

### Implantes

Código	Descripción
FG-AN012047	Ancla SpinFit PK de 4,7 mm x 19,1 mm sin sutura
FG-AN012147	Ancla SpinFit PK de 4,7 mm x 19,1 mm con una sutura TapeFit Max (blanca-negra)

### Instrumental asociado

Código	Descripción
FG-IN081047	Broca para Knotix de 5,5 mm y SpinFit de 4,7 mm
FG-IN001047	Punzón para Knotix de 5,5 mm y SpinFit de 4,7 mm